

自然妊娠をめざした、卵管へのアプローチ

ファロプラストTM

FTカテーテルシステム


卵管鏡下卵管形成システム



卵管の閉塞・狭窄を低侵襲に治療する不妊治療のためのシステム

- FTカテーテルキットとFT卵管鏡を中心に構成される卵管鏡下卵管形成システム。
- 特殊なバルーンカテーテルを用いることにより、子宮側からアプローチして卵管の通過障害を低侵襲に治療するとともに、卵管内腔の観察を実現。

FTカテーテルキット

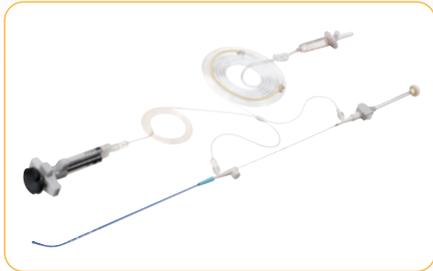

■ 品種表

コード番号	共通商品コード (JAN)
FT-LE06GA	4987350600516
FT-LE10GA	4987350600554

一般的名称：卵管形成術用カテーテル
販売名：FTカテーテルキット
医療機器認証番号：20700BZY00636000
製造販売業者：テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

FT 灌流ポンプ



■ 品種表

コード番号	共通商品コード (JAN)
VS-4100	4582270690458

一般的名称：内視鏡用灌流・吸引装置
販売名：FT 灌流ポンプ VS-4100
医療機器認証番号：302AKBZX00015000
特定保守管理医療機器
製造販売業者：株式会社メテク
〒350-0833 埼玉県川越市芳野台1-103-66

アイピースアダプタ



■ 品種表


コード番号	共通商品コード (JAN)
VS-952	4987350888433

一般的名称：内視鏡用部品アダプタ
販売名：FT 卵管鏡 (アイピースアダプタ)
医療機器届出番号：13B2X00388000016
製造販売業者：有限会社新興光器製作所
〒113-0033 東京都文京区本郷2-12-2


FT 卵管鏡

卵管内腔を観察するための 細径で柔らかい卵管鏡

卵管内腔所見

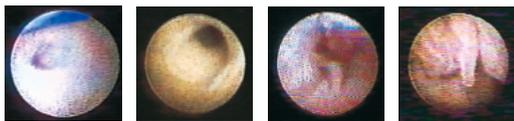

- 細くて繊細な卵管内を通過できる細径 (0.5mm、0.6mm) で柔軟な軟性鏡。
- 最適な卵管内腔画像を得るために、焦点距離を短く設定。

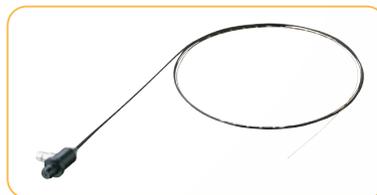

■ 仕様


- ・ 外径：0.5mm、0.6mm
- ・ 有効長：1790mm
- ・ 視野角：70° (in water)
- ・ 焦点距離：0.5mm

■ 品種表

コード番号	共通商品コード (JAN)
FT-SG0505P	4987350476739
FT-SG0506P	4987350695079

一般的名称：軟性卵管鏡
販売名：FT 卵管鏡
医療機器承認番号：20700BZY00639000
特定保守管理医療機器
製造販売業者：テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

■ システムのセットアップ例

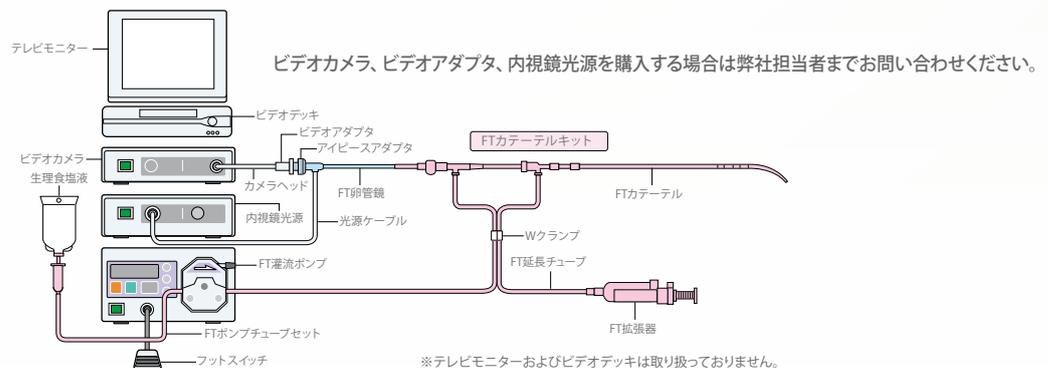

ファロプラストFTカテーテルシステムとして上記弊社製品以外に、内視鏡光源、光源ケーブル、プロセッサー、ビデオアダプタ、エフティ腫鏡、エフティ子宮鉗子を併用する必要があります。

※本製品の詳細は電子添文をご参照ください。